

Keep Vibing everyday



G·U·M[®]
ORTHO

Gib deinen Zähnen
und deinem Zahnfleisch
die umfassende Pflege,
die sie verdienen

**Zahnspangen benötigen
zusätzliche Pflege.
Es ist Zeit die Spielregeln
anzupassen!**



STARTER HACKS

**Vermeide harte und klebrige
Lebensmittel – das kann deine
Zahnspange beschädigen.**

Nach jedem Essen die drei Schritte des **ORTHO** Rituals ausführen.

- Wechsle deine Zahnbürste mindestens alle 3 Monate und die Interdentalbürste wöchentlich.
- Wenn du dir nicht sicher bist – frag in deiner Zahnarztpraxis nach.



ALIGNER-TRÄGER

Natürlich kannst du alle GUM® ORTHO Produkte auch verwenden – nur die GUM® ORTHO Zahnbürste benötigst du nicht. Verwende hier z. B. GUM® PRO Zahnbürste.



SMART MOVES

Schau dir unsere
Videos zum 1-2-3
Pflege-Ritual an




SCHRITT


1



Zwischen den Zähnen
reinigen und rund um
die Brackets

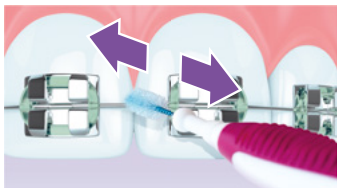

Zwischen den Zähnen reinigen.

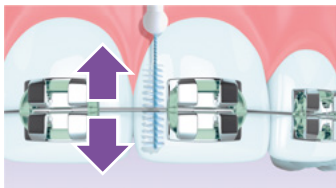

Rund um die Brackets reinigen.

Weiche
Borsten

GUM® TRAV-LER®

Softe, effektive Reinigung
der Zahnzwischenräume
und rund um die Brackets –
in 10 Größen verfügbar.





**Enge
Zahnzwischen-
räume?**

Verwende

GUM® ORTHO FLOSS

Zahnseide.

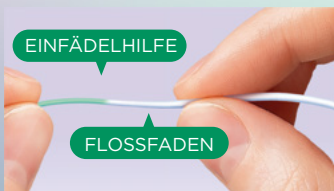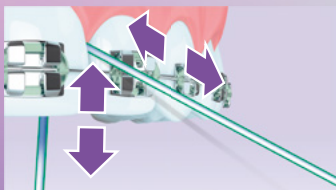

Mit der Einfädelhilfe den Flossfaden in den Zahnzwischenraum einführen.
Dann Auf- und Abwärtsbewegungen durchführen.




Zähneputzen

Innen- und Außenflächen:




Zahnbürste im 45 Grad Winkel auf Zähne und Zahnfleisch setzen. Kleine Rüttelbewegungen ausführen und dann eine Auswischbewegung weg vom Zahnfleisch ausführen.

Brackets:

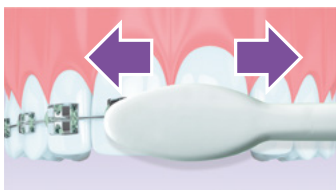

Alle Brackets reinigen. Dazu kleine Vor- und Rückbewegungen durchführen.

Brackets:

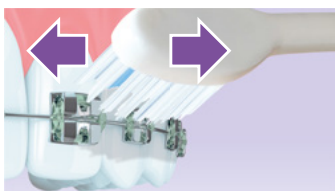

Vor- und Rückbewegungen oberhalb und unterhalb des Drahtes durchführen.

GUM® ORTHO Zahngel

Mit **Fluorid + Isomalt** für eine starke Kariesprophylaxe.



GUM® ORTHO Zahnbürste

Kompakter Bürstenkopf mit V-Schnitt.

oder

GUM® SONIC ORTHO Schallzahnbürste

Kombiniert sanfte Schallvibrationen mit einem einzigartigen Bürstenkopfdesign.

SCHRITT

3



Spülen & Erfrischen



10/15 ml in die Verschlusskappe füllen und für 30 Sekunden spülen.

GUM® ORTHO Mundspülung

Erfrischend, sanft und antibakteriell mit einem **frischen, milden Geschmack**. Die spezielle Formulierung bildet eine **schützende Barriere gegen Zahnbelag** und hält den Atem gaaaaanz lange frisch.



Die Zahnsperre stört?

Kein Grund zur Sorge! GUM® ORTHO Wachs kann hier helfen. Einfach auf scharfe Drähte, Brackets oder Klammern aufbringen und so das Zahnfleisch vor Reizungen und Verletzungen schützen.



GUM® ORTHO
Zahngel
PZN D 09200048
PZN AT 4886101



GUM® ORTHO
Mundspülung
PZN D 12496851
PZN AT 4886118

GUM® SONIC ORTHO
Schallzahnbürste
PZN D 19436415
PZN AT 5964642



GUM® ORTHO
Zahnbürste
PZN D 7325001
PZN AT 3115608



GUM® ORTHO
Wachs, mint
PZN D 16808276
PZN AT 5632101



GUM® ORTHO FLOSS
Zahnseide
PZN D 18186436
PZN AT 5699022



Erhältlich in Zahnarztpraxen,
ausgewählten Drogeriemärkten,
Apotheken und in Onlineshops.
Per Scan zur Händlersuche:



SUNSTAR Deutschland GmbH

 GUMSunstarDE

 gumsunstarde

www.SunstarGUM.de



Art.-Nr. T329 04/2025