

SUNSTAR

4200

G·U·M[®]

PowerCARE[™]
PROFESSIONAL EXPERTISE

RECHARGEABLE
TOOTHBRUSH

INTENSIVE PLAQUE
CONTROL

GENTLE ON YOUR
TEETH & GUMS



HEALTHY GUMS. HEALTHY LIFE.[®]



LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

1. INTRODUCTION

La marque GUM® s'appuie sur une philosophie fondamentale de prévention, d'innovation et de qualité, reposant sur la vision pionnière de SUNSTAR : « préserver un corps sain grâce à une bouche saine ». Chez GUM®, nous nous engageons à aider chacun à maintenir des gencives et des dents saines tout au long de sa vie.

L'importance d'une bonne hygiène bucco-dentaire

La bouche est pleine de bactéries. Si le brossage n'est pas rigoureux et les produits inadaptés, la plaque dentaire peut s'accumuler et créer du tartre. Les bactéries et le tartre peuvent alors causer une inflammation des gencives, également connue sous le nom de gingivite. Les gencives deviennent enflées, rouges et saignent. Si elle n'est pas traitée, la gingivite peut dégénérer en parodontite, ce qui peut entraîner une perte de dents.

Les brosses à dents électriques peuvent s'avérer plus efficaces pour enlever la plaque, car elles aident à améliorer la technique et le respect du temps de brossage (2 minutes).

GUM® PowerCARE™ a une tête de brosse unique avec des brins ultra-fins qui nettoient en profondeur, même dans les zones difficiles d'accès, dans le sillon gingival et entre les dents, pour aider à maintenir une santé bucco-dentaire optimale.

2. DESCRIPTION DU PRODUIT (Figure 1)

1. Tête de brosse avec des brins ultra-fins
2. Manche ergonomique
3. Bouton Marche / Arrêt / Mode
4. Témoin du capteur de pression
5. 2 modes de brossage
6. Voyant de batterie
7. Base de chargeur avec câble

3. PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de produits électriques, en particulier en présence d'enfants, des précautions de sécurité de base doivent être suivies, y compris les suivantes :

DANGER

1. Ne plongez pas le chargeur dans l'eau ou tout autre liquide.
2. N'utilisez pas l'appareil pendant le bain.
3. Ne touchez pas le chargeur s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
4. Ne placez et ne rangez pas le chargeur à un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire, une douche ou un lavabo.

ATTENTION

Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures aux personnes :

1. Une étroite surveillance est nécessaire lorsque le produit est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou d'une personne handicapée.
2. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de trois ans.
3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
4. Le nettoyage de l'appareil ne doit pas être effectué par des enfants
5. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensori-

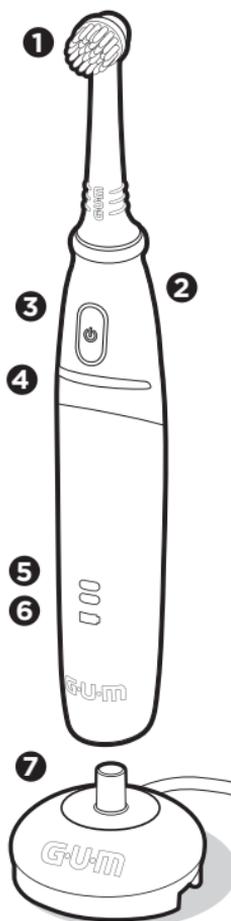


Figure 1

- elles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été supervisées ou instruites par une personne responsable de leur sécurité.
- Utilisez uniquement dans le cadre de l'usage prévu décrit dans ce manuel.
 - N'utilisez jamais ce produit s'il a un câble ou une prise endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou si le chargeur a été plongé dans l'eau.
 - Gardez le câble du chargeur à l'écart des surfaces chauffées.
 - Ne laissez jamais tomber l'appareil et n'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil.
 - N'utilisez pas le produit à l'extérieur ou lorsque des aérosols (vaporisateurs) sont utilisés. Ne pas utiliser là où de l'oxygène est administré.
 - Connectez ce produit uniquement à une prise correctement reliée à la terre.
 - Ne forcez jamais la fiche dans une prise de courant.
 - Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. S'il est endommagé, jetez le chargeur.

4. AUTRES PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Pour votre sécurité, conformez-vous à ce qui suit :

- Demandez conseil à votre dentiste avant de l'utiliser si vous avez subi une chirurgie orale ou parodontale au cours des 12 derniers mois ou si vous avez d'autres problèmes de santé bucco-dentaire en cours de traitement.
- Dans des circonstances normales, tout saignement léger à modéré qui survient devrait cesser à mesure que les gencives redeviennent saines. Contactez votre chirurgien-dentiste en cas de saignement excessif, si les saignements persistent après deux semaines de brossage avec ce produit, ou si vous ressentez une gêne ou une douleur lors du brossage.
- N'utilisez pas de tête de brosse avec des brins écrasés ou pliés. Remplacez-la immédiatement avec une nouvelle tête de brosse.
- Vérifiez régulièrement que le manche, la tête de brosse, le câble du chargeur, la fiche et l'endroit où le câble entre dans le chargeur ne sont pas abîmés. Ne continuez pas à utiliser un produit endommagé.
- Ne manipulez pas le chargeur ou sa fiche d'alimentation avec des mains mouillées car cela pourrait provoquer un choc électrique.
- Ne branchez pas le chargeur dans une prise électrique immédiatement après qu'il soit accidentellement tombé dans l'eau ou un autre liquide. Laissez le chargeur sécher pendant au moins 24 heures avant de le brancher dans une prise électrique.
- Si la brosse à dents est tombée, la tête de la brosse doit être remplacée avant la prochaine utilisation même si aucun dommage n'est visible.
- Lorsque vous débranchez le chargeur, faites-le toujours en tenant la fiche d'alimentation et non le câble.
- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas de réparer, modifier ou désassembler une partie du manche ou du chargeur. Cela pourrait causer des blessures, un choc électrique ou un incendie.

5. UTILISATION DE VOTRE BROSSE À DENTS GUM® POWERCARE™

CHARGER VOTRE BROSSE

Avant la première utilisation, chargez complètement votre brosse à dents GUM® PowerCARE™ pendant au moins 16 heures.

- Branchez le chargeur dans la prise électrique. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le recharger. Il ne peut pas être allumé pendant le chargement.
- La charge complète prend au moins 16 heures et devrait fournir 10 jours de brossage sur base d'un brossage pendant 2 minutes, deux fois par jour.
- Lorsque le manche est sur le chargeur, le témoin de batterie (voir la Figure 1-6) commence à clignoter en vert pour indiquer qu'il est en cours de charge. Lorsque le voyant vert ne clignote plus, le manche est complètement chargé.
- Pendant l'utilisation de la brosse, le voyant de la batterie restera vert indiquant que la brosse est complètement chargée.

5. Lorsque l'appareil a besoin d'être rechargé, le voyant de la batterie (voir la figure 1-6) devient rouge en mode marche. Il clignotera alors en rouge pendant 15 secondes lorsque la brosse est éteinte.

La brosse à dents peut être stockée sur la base du chargeur (voir Figure 1-7) pour maintenir la charge. Pour charger / recharger votre brosse à dents GUM® PowerCARE™, n'utilisez que le chargeur fourni avec le produit.

ASSEMBLAGE DE VOTRE BROSSÉ

1. Insérez la tête de brosse sur le haut du manche avec les brins orientés vers l'avant (voir Figure 2).
2. Avec une pression modérée, poussez la tête de la brosse vers le bas jusqu'à ce que la base de la tête de la brosse s'arrête en haut du manche (voir la Figure 2).
3. Si la tête de la brosse ne s'enfonce pas vers le bas, elle peut ne pas être orientée vers l'avant et centrée sur l'axe du manche. Répétez l'étape 1 ci-dessus.

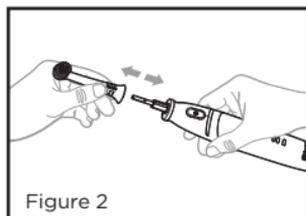


Figure 2

CAPTEUR DE PRESSION POUR PREVENIR UN BROSSAGE TROP INTENSE

1. Un capteur de pression a été intégré à la brosse à dents électrique, pour protéger les dents et les gencives lorsque le brossage est trop fort.
2. Si une pression excessive est exercée pendant le brossage, le témoin du capteur de pression (voir Figure 1-4) devient bleu et reste clignotant tant que la pression excessive persiste. Ceci est un rappel pour réduire la pression pendant le brossage. Lorsque vous réduisez la pression, la lumière bleue s'éteint automatiquement.

MINUTEUR 2 MINUTES AVEC SIGNAUX DE CHANGEMENT DE QUADRANT A 30 SECONDES

1. Les chirurgiens-dentistes recommandent de brosser l'intégralité de la denture pendant au moins deux minutes ou 30 secondes pour chacun des quatre quadrants de la bouche. Un quadrant comprend toutes les surfaces dentaires depuis le centre avant de la bouche jusqu'à la dernière dent à l'arrière. Il y a quatre quadrants, gauche et droite, bas et haut.
2. Au bout de 30, 60 et 90 secondes, il y aura 2 impulsions courtes. Ces impulsions signalent qu'il est temps de passer à un nouveau quadrant. Au bout de 2 minutes, il y aura 4 impulsions courtes. La brosse continuera à fonctionner après 2 minutes avec des impulsions à des intervalles de 30 secondes.

COMMENT SE BROSSER LES DENTS AVEC VOTRE BROSSÉ GUM® POWERCARE™

1. Appliquez une quantité de dentifrice de la taille d'un pois sur la surface des brins.
2. Insérez la brosse à dents dans votre bouche et positionnez la tête de brosse sur la dent arrière. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt / Mode. (Voir Figure 1-3) Brossez en mode Quotidien ou appuyez de nouveau sur le bouton Marche / Arrêt / Mode pour passer en mode Sensitive.
3. Pour un nettoyage optimal, brossez doucement le long du sillon gingival, dent par dent, sur les surfaces externes et internes. Nettoyez ensuite la surface occlusale (surface supérieure masticatoire) à l'aide de mouvements horizontaux.
4. N'appuyez pas trop fort pendant le brossage. À la fin de chaque intervalle de 30 secondes, passez à un autre quadrant et répétez comme indiqué à l'étape 3, jusqu'à ce que le temps de brossage recommandé de 2 minutes ait été atteint.

Remarque : un léger saignement peut survenir au cours des premiers jours d'utilisation. Si le saignement persiste pendant plus de deux semaines, contactez votre chirurgien-dentiste.

2 MODES DE BROSSAGE

1. Quotidien - Pour un nettoyage quotidien profond et doux.
2. Sensitive - Extra doux, pour ceux qui ont des dents ou des gencives sensibles.

COMMENT MODIFIER LES MODES DE BROSSAGE

1. Lorsque la brosse est allumée (voir la Figure 1-3), elle démarre automatiquement en mode Quotidien. Le voyant de mode supérieur (voir la Figure 1-5) s'allume en vert.
2. Pour passer en mode Sensitive, appuyez une deuxième fois sur le bouton Marche / Arrêt / Mode. Le voyant de mode (voir la Figure 1-5) s'allume alors en vert.

3. Appuyez à nouveau sur le bouton Marche / Arrêt / Mode pour éteindre la brosse à dents ou deux fois pour revenir au mode Quotidien

QUAND REMPLACER LA TÊTE DE BROSSÉ

La tête de la brosse doit être remplacée tous les 3 mois comme recommandé par les chirurgiens-dentistes ou plus tôt si elle montre une usure visible des brins. Une tête de brosse usée n'assure pas un nettoyage efficace des dents.

COMMENT REMPLACER LA TÊTE DE BROSSÉ À DENTS

1. Saisissez le manche d'une main et la tête de la brosse de l'autre main.
2. Tirez la tête de brosse vers le haut (voir la Figure 2).
3. Jetez la tête de brosse usagée et insérez la nouvelle tête de brosse sur le manche.
4. Poussez la tête de la brosse vers le bas jusqu'à ce que la base de la tête de la brosse touche le haut du manche. (Voir les Figures 1-1 et 1-2).

Compatible uniquement avec les têtes de brosse GUM® PowerCARE™. Les autres têtes de brosse ne sont pas approuvées pour une utilisation sur ce produit et peuvent annuler la garantie.

COMMENT NETTOYER LA BROSSÉ À DENTS ET LA BASE DE CHARGEUR

Important : Nettoyez le manche de la brosse et la tête de la brosse après chaque utilisation pour optimiser la durée de vie de votre brosse à dents électrique.

1. Manche et tête de brosse :

- a) Rincez la tête de la brosse sous l'eau courante jusqu'à ce qu'elle soit propre. (Voir la Figure 3)
- b) Avec le manche désactivé, retirez la tête de la brosse (Voir Figure 2). Rincez le manche, y compris la zone autour de l'axe métallique à l'endroit où la tête de brosse se fixe, dans de l'eau courante tiède. (Voir la Figure 4)
- c) Essayez le manche et la tête de brosse à sec. (Voir la Figure 5)
- d) Réinsérez la tête de brosse sur le manche.

2. Base du chargeur :

- a) Débranchez avant de nettoyer.
- b) Nettoyez la base du chargeur avec un chiffon humide. (NE PAS plonger dans l'eau ou d'autres liquides, NE PAS rincer à l'eau ou l'insérer dans l'eau pour la nettoyer). Assurez-vous qu'elle est complètement sèche avant de la rebrancher dans la prise électrique. (Voir les Figures 6 et 7)

6. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications de la batterie

Deux piles rechargeables en nickel-hydrure métallique (Ni-MH) : 2.4V DC

Exempt de cadmium, de plomb et de mercure.

Alimentation du chargeur

- Entrée : 220-240V - 50Hz
- Puissance : 0.9W

Ne pas brancher sur une prise électrique d'une tension autre que celle spécifiée ci-dessus.

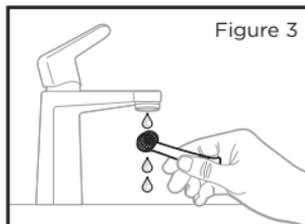


Figure 3

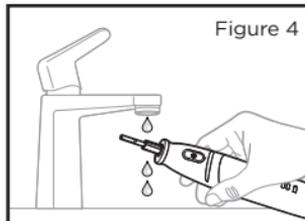


Figure 4

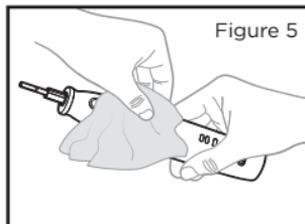


Figure 5

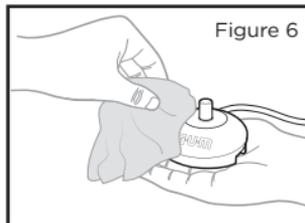


Figure 6

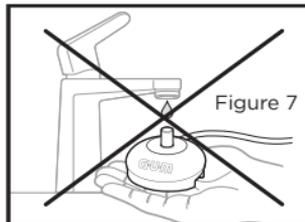


Figure 7

7. ÉLIMINATION DES DÉCHETS



Avis environnemental

Ce produit contient des déchets électriques recyclables et des piles rechargeables en nickel-hydrure métallique (Ni-MH). Pour protéger l'environnement et la santé humaine, ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers quotidiens. Une fois que la brosse à dents a atteint la fin de sa vie utile, ou a été endommagée, merci de déposer le manche dans son intégralité à votre centre de recyclage local pour destruction.



Ni-MH

Informations sur www.eco-systemes.fr

8. DÉPANNAGE

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La brosse à dents ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none"> • Cela peut nécessiter de la recharger 	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez fermement sur le bouton On / Off / Mode à nouveau • Chargez la brosse à dents comme indiqué dans cette notice
	<ul style="list-style-type: none"> • Les brins peuvent être collés entre eux avec du dentifrice 	<ul style="list-style-type: none"> • Si les brins de la brosse sont collés entre eux avec du dentifrice, suivez les instructions de nettoyage indiquées dans cette notice
La brosse à dents se décharge trop rapidement.	<ul style="list-style-type: none"> • Pour la première utilisation, ou après une longue période de non-utilisation, la batterie a besoin de 16 heures de charge. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez une pression plus légère lors du brossage. • Rechargez en continu pendant au moins 16 heures.
Les brins de la brosse s'usent avant 3 mois (période préconisée avant remplacement)	Le brossage est peut-être trop intensif.	Utilisez une pression plus légère lors du brossage
La sensation de picotement pendant brossage	C'est normal, surtout si vous utilisez une brosse à dents manuelle auparavant.	Après une semaine d'utilisation, vous serez plus habitué à la vibration.
Les gencives saignent légèrement	<ul style="list-style-type: none"> • Le mode de brossage n'est pas optimal • Cela peut arriver durant les premiers jours d'utilisation 	<ul style="list-style-type: none"> • Essayez d'utiliser le mode "Sensitive" au lieu du mode "Quotidien" • Le saignement devrait cesser après quelques jours. S'il persiste plus de 2 semaines, veuillez consulter votre chirurgien-dentiste

Si vous ne trouvez pas de solution à votre problème, contactez-nous. Vous pouvez également consulter la section FAQ sur www.SunstarGUM.com.

9. GARANTIE

Sunstar Europe SA garantit que ce produit est exempt de tout défaut, tant dans les matériaux utilisés que dans leur fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale. Sous réserve des exclusions ci-dessous, si la brosse à dents GUM® PowerCARE™ présente des défauts de matériaux ou de fabrication dans les deux ans suivant la date d'achat initiale, Sunstar remplacera gratuitement votre brosse à dents. Il suffit d'adresser cette dernière avec son chargeur, sous enveloppe affranchie, et de joindre une copie du reçu d'achat original (en encerclant le prix) ainsi qu'une brève description du problème rencontré.

Exclusions : la garantie visée ci-dessus ne couvre pas les têtes de brosse, ne couvre pas les dommages résultant d'une altération ou mauvaise manipulation du produit, ni les tentatives non autorisées de réparer / modifier le produit, ni toute utilisation contraire aux instructions d'emploi, toute usure normale, tous dommages purement esthétiques et qui n'affectent pas le bon fonctionnement de la brosse à dents ainsi que l'utilisation de têtes de brosse ou de chargeur non prévus pour ce produit.

La présente garantie ne peut être transférée. Selon les pays, vos droits peuvent varier. La présente garantie remplace toutes les autres garanties, explicites, tacites ou statutaires, y compris les garanties tacites de qualité marchande, d'adaptabilité à but particulier et fait échec à tout autre recours.

Sunstar Europe SA ne sera en aucun cas responsable de dommages accessoires ou indirects.

Manufactured for:

Sunstar Iberia S.L.U., c/ Aragó, 208, 1º2º, ES-08011 Barcelona

Distributed by:

Sunstar Europe S.A., CH-1163 Etoy

Sunstar Europe S.A. Oddział w Polsce, PL-02-222 Warszawa

Sunstar France S.A.S., FR-92300 Levallois-Perret

Sunstar Italiana SRL., IT-21047 Saronno

Sunstar Deutschland GmbH., DE-79677 Schönau

Sunstar Sverige AB., SE-436 33 Askim

Sunstar Benelux B.V., NL-1382 JL Weesp

Made in China

4200LE1218 Rev. 12/2018

SunstarGUM.com

